

本品は通常の救急ばんそうこうとは異なりますので、この添付文書をよく読みで使用ください。  
又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

医療用品(4) 整形用品 管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDNコード 71025000  
販売名「バンドエイド ahh」

再使用禁止



使用上の注意

**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、治癒が遅れたり、副作用が起こりやすくなる。)

- ① 次の部位には使用せず、医師の診断を受けること。(使用した場合、傷の悪化、発熱、治癒の遅れにつながる場合がある。)
  - (1) 感染がみられる傷。感染がみられる傷とは、傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常が認められる傷のこと。
  - (2) 感染を起こす可能性のある傷。感染を起こす可能性のある傷とは次のような傷のこと。
    - ア) 深いさし傷、筋肉・骨・腱が見えるような深い傷。
    - イ) かさぶたがすでにできている傷。(はがす時に製品がかさぶたにくっつくなどして、再び傷つける恐れがある。)
    - ウ) 動物や人に咬まれた傷。
    - エ) ガラス・木片・砂・ほこり・衣服の繊維など異物が入り込んだ傷。
    - オ) 受傷してから時間が経った傷(特に翌日になってからのご使用はおやめください。)
  - (3) にきび、湿疹、虫さされ、皮膚炎などの症状、及びそれらをかきむしった傷。
  - (4) 目の周囲、粘膜。
- ② 本品を切って使用しないこと。個包装から開封した状態で長時間放置しないこと。一度使用したものを再使用しないこと。
- ③ 一枚でおおいきれない大きさの傷には使用しないこと。傷の大きさより大きいサイズ(中央部分が目安)の製品を使用すること。特に傷口の周辺部が乾燥し始めている場合は、必ず中央部に収まるように貼付すること。
- ④ 貼付前に傷を水道水などでよく洗浄すること。傷に塗布する軟膏・クリーム及びヨードチンキ等の殺菌・消毒薬を、本品と併用しないこと。使用した場合は、水道水などで残さないようによく洗い流すこと。
- ⑤ 出血させたり、再生した皮膚を取り除かないように、注意して静かにゆっくりはがすこと。(乾いた浸出液のほとんどでないような)傷に使用すると、はがす際に傷を更に傷つける恐れがある。)
- ⑥ 2歳以下の乳幼児には使用しないこと。
- ⑦ 体液が漏れたり、パッド部分が汚れたり、はがれたりした場合はそのまま貼り続けられないこと。その場合は本品をはがし、傷を水道水などでよく洗浄した後、新しいものに貼り替え、傷口を清潔に保つこと。

**相談すること**

- ① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
  - (1) 糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
  - (2) 強い倦怠感を感じていたり、発熱があるなど全身状態がよくない人。
- ② 次の場合は、使用を直ちに中止し、この添付文書を持って医師の診療を受けること。
  - (1) 本品の使用により、傷の悪化、化膿、感染(傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常が認められる場合)、傷の治りが悪い等の症状があらわれた場合。
  - (2) 本品の使用により、傷口の周りに発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合。
  - (3) 貼付中に感染を示す症状(傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常)が認められた場合。
  - (4) 貼り替えながら、数日間使用しても症状がよくならない場合。
  - (5) はがす時に膿のようなものが認められた場合。(膿は淡黄色でねばねばしており、臭いがする。又、膿の場合、傷口の周りに赤い腫れをとまなう。ただし、透明又は白色からグレー色をしたゼリー状で、臭いが無い場合は、製品の残留物(傷口から出てくる体液(浸出液)を本品が吸収したものである)なので、水道水などで洗い流すこと。)


**【効能・効果】**

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、  
「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」


## 【用法・用量】

本品は通常の救急ばんそうこうとは異なりますので、用法・用量を確認して正しくご使用ください。

1)定められた用法・用量を守ってください。 2)小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとに使用させてください。又、2歳以下の乳幼児には使用しないでください。 3)本品は外用ですので、内服しないでください。

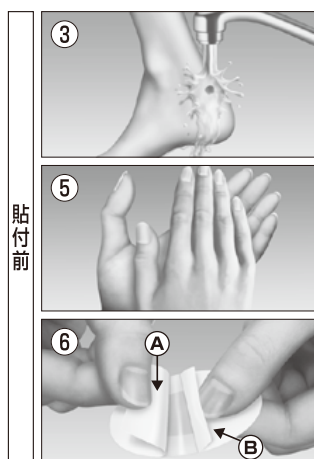


- ③ 本品を貼付しようとする傷が、感染(傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常が認められる)していないこと、又、傷から出る体液や血液が固まっていないことを確認してください。特に翌日になってからのご使用はおやめください。
- ② 殺菌・消毒薬等や軟膏・クリームは本品と併用しないでください。使用した場合は、水道水などでよく洗い流してから本品をご使用ください。
- ③ 傷を水道水などでよく洗浄し、水気を清潔なティッシュペーパーやタオル等でふきとってください。
- ④ 中央部分に収まる大きさの傷を目安にお使いください。特に傷口の周辺部が乾燥し始めている場合は、必ず中央部に収まるように貼付してください。本品を切って使用しないでください。又、一度個包装を開封したものを使用したり、一度使用したものを再使用しないでください。
- ⑤ 本品を個包装から取り出します。本品を両手で約1分間温めてください。貼付した時に、皮膚へのなじみがよくなります。
- ⑥ 本品下面の両方の剥離紙(A)、(B)の端を持ち、まず外側の剥離紙(A)をはがし、ついで内側の剥離紙(B)の端を持ちながら粘着面を傷にあて、剥離紙(B)をはがしてください。

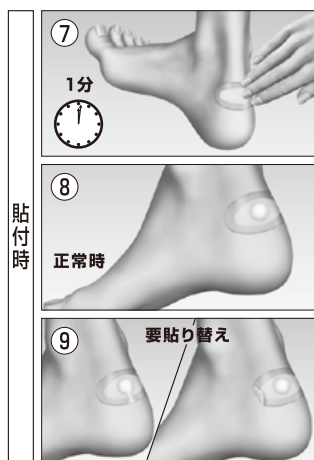

- ⑦ 本品を傷にあてた後、傷や傷口の周りに、均一に、そして確実に粘着するように、本品を上から手のひらで約1分間おさえて温めてください。本品の端がしっかり皮膚に粘着していることを確認してください。ただし、かかとなど動きのある部位に貼る場合は、皮膚を伸ばした状態で貼付してください。

\*粘着面に、くぼみやムラがみられることがありますが、製造過程で生じるもので品質上問題ありません。

- ⑧ 貼付後しばらくすると、傷口からにじみ出てくる体液(滲出液)を本品が吸収・保持し、その部分がゲル化し白くふくらみます。傷は治るにしたがい、体液(滲出液)の分泌が減ってきます。そのため貼り替えるたびに、その白いふくらみが小さくなります。
- ⑨ 貼付中、傷口から出てくる体液(滲出液)の漏れが認められた場合、本品が汚れたりはがれそうな場合、又は、はがれてしまった場合は、「貼り替え時」にしたがって本品をはがし、傷と周りの皮膚を水道水などで洗浄した上で、新しいものと貼り替え、傷口を清潔に保ってください。
- ⑩ 貼付中は、最低2,3日に1回は傷を観察し、感染を示す症状(傷口の周りが赤くなっていたり、ズキズキした痛みが続いたり、膿を持っていたり、熱や腫れ等の異常)が認められないことを確認してください。体液(滲出液)の漏れや本品のはがれがなく感染の恐れがない場合には最長で5日間貼れますが、感染の症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

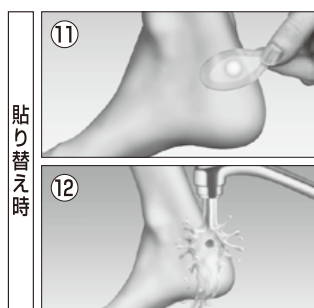

- ⑪ 本品の一端を軽く横に何回か引っ張って、ゆっくりはがしてください。はがれにくい場合は温水を皮膚と本品の隙間に流し込むようにするとはがれやすくなります。出血させたり、皮膚を引っ張って傷つけないように、注意して静かにゆっくりはがしてください。
- ⑫ はがした時に膿のようなものがないか確認してください。膿は、淡黄色でねばねばしており、臭いがします。この場合には、本品の使用を中止して医師の診察を受けてください。ただし、透明又は白色からグレー色をしたゼリー状で、臭いが無い場合は、製品の残留物(傷口から出てくる体液(滲出液)を本品が吸収したもの)ですので、水道水などで洗い流してください。

## 【保管及び取扱上の注意】

- 1)直射日光を避け、涼しい所に保管してください。 2)小児の手の届かない所に保管してください。 3)本品の使用期間は3年です。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包装:靴ずれ用 54mm×29mm 6枚入り

外国特例承認取得者(製造業者):コロプラスト A/S, デンマーク (Coloplast A/S, Denmark)

選任製造販売元:株式会社コーブリッジ 東京都文京区本郷3-3-12 TEL:03-3811-6850

発売元:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

お客様相談室 0120-101110 ホームページアドレス <http://www.jnj.co.jp/consumer/>

55708495



®登録商標 ©J&JKK2010